



- 
 Eclaircissement du teint
- 
 Effet lifting
- 
 Resserrement des pores
- 
 Cicatrices d'acné
- 
 Diminution des rides

Spécifications Techniques

Modèle	VIVACE
Alimentation électrique	100/230 VAC 50/60 Hz
Consommation électrique	40 VA
Dimensions	380 x 1140 x 340 mm
Poids	27 Kg
Fréquence	1 Mhz / 2 Mhz
Contrôle de la puissance de sortie	PWM
Ecran	10,4 " LCD tactile

VIVACE

RF FRACTIONNELLE PAR MICRO AIGUILLES



*Effet Volumateur
Lifting et Réjuvénation*
Radio Fréquence Fractionnelle par Micro-aiguilles



Diminution des rides



Cicatrices d'acné



Resserrement des pores



Effet lifting



Eclaircissement du teint

Elegante & Facile VIVACE



Caractéristiques de VIVACE

- Des électrodes sous forme de micro-aiguilles délivrent de la radio fréquence bipolaire directement dans le derme.
- Ceci provoque des micro-brûlures induisant une production de nouveau collagène et d'élastine
- Méthode peu invasive permettant d'obtenir un effet remodelant de façon quasi indolore et avec une reprise rapide des activités.
- Les aiguilles partiellement isolées permettent d'atteindre le derme sans créer de lésions au niveau de l'épiderme.
- Fréquence de 1 Mhz / 2 Mhz pour un résultat optimisé.
- Micromoteur permettant la pénétration tout en douceur des aiguilles réduisant ainsi la douleur et les effets secondaires.
- Contrôle précis pour traiter les divers qualité de peau.
LED Rouge & Bleue optimisant la génération de collagène et le traitement de l'acné.
- Appareil à usage unique et simple d'utilisation.

- ✓ Résultats immédiats
- ✓ Sans douleur !
- ✓ Sans effet secondaire gênant

Les Accessoires



- Appareil comportant 36 aiguilles plaquées or
- Systèmes de réglage motorisé
- Pièce à main légère et ergonomique
- Ecran tactile couleur
- Sauvegarde de programmes
- Interrupteur manuel et par pédale
- Niveau de puissance 1-9 / Profondeur d'aiguille 0,5 - 3,5 mm



Principe de VIVACE

1 Création de collagène par micro-aiguilles

Après anesthésie locale, les micro-aiguilles pénètrent dans la peau et créent des canaux microscopiques au niveau du derme qui stimulent l'organisme à produire du collagène neuf. Ces canaux facilitent aussi la pénétration de crèmes à base de vitamines A et B qui stimulent le renouvellement de la peau et favorisent aussi la pénétration de la lumière LED. La peau apparaît ainsi plus fraîche et plus jeune

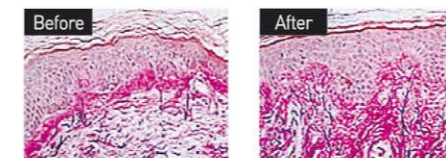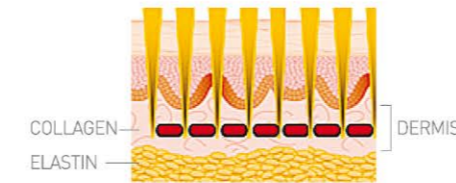

2 Mécanisme de cicatrisation par radio fréquence

Les micro-aiguilles à l'exception de la pointe sur 0,3 mm sont couplées entre elles, leur permettant de délivrer une énergie bipolaire directement dans le derme sans aucun dommage au niveau de l'épiderme. La profondeur de l'énergie est déterminée et contrôlée de sorte que l'onde électromagnétique chauffe, contracte et renouvelle les fibres de collagène dans le derme (la peau) et ainsi redonne à la peau sa tonicité.

Avantages de VIVACE

1. 1Mhz et 2 Mhz : deux fréquences de RF pour atteindre des cibles différentes

	1MHz	2MHz
Wavelength		
Range		
Indication	RF à large spectre pour la remise sous tension de la peau	RF à spectre étroit pour le traitement des cicatrices vergetures et de pores dilatés

1. Micro-aiguilles isolées et non isolées



3. Light Emitting Diode (LED)



LED BLEUE
Cible la destruction du Propionibacterium acné, bactérie associée à l'acné



LED ROUGE
Augmente la vitesse de reproduction des tissus et stimule le renouvellement cellulaire.

Résultats Cliniques



copyright Steven M. Gitt, M.D, F.A.C.S